



aczel

Phòng thí nghiệm

Ultra Micro | Micro | Filter Micro | Pipette Micro Balances



Biến Công Nghệ Thành Giải Pháp

www.aczel.com


www.vietnguyenco.vn

www.vietnguyenstore.com



Cân vi lượng (06 số lẻ)

CM-F Series

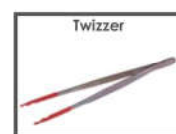

Cân vi lượng Aczet CM-F sê-ri được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu độ phân giải cao về khả năng đọc ($d = 1\mu g$) và dung lượng lên tới 31gm. Chúng được trang bị màn hình LCD với menu người dùng mở rộng.

Được trang bị buồng cân được thiết kế đặc biệt với các vách ngăn bằng nhôm hình trụ, giúp bộ lọc giảm thiểu ảnh hưởng của điện tĩnh đến kết quả cân.

Hiệu chỉnh tự động (PSAC) đảm bảo độ chính xác cao hơn của phép đo.

Bộ lọc trọng lượng cho ứng dụng

- Dòng ACZET CM-F series lý tưởng cho việc hỗ trợ thiết bị kiểm tra giám sát ô nhiễm hoặc đo phát thải hạt trong nhiên liệu diesel theo quy định 40 CFR 86.1312-2007 có hiệu lực toàn cầu do cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) ban hành
- Động cơ diesel có lợi về kinh tế ngày càng trở nên phổ biến, nhưng phát thải hạt bị hạn chế nghiêm ngặt theo quy định. Xác định trọng lượng của vật chất hạt (PM) là một nhiệm vụ quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô và tiêu chuẩn có thể sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn. Để cho phép đo

các hạt trong thời gian phát thải dễ dàng hơn.

- Kiểm tra khí thải là một việc quan trọng không chỉ trong ngành công nghiệp ô tô mà trong các ngành công nghiệp hóa dầu và dầu mỏ.

Model	CM 2F	CM 5F	CM 6.1F	CM 11F
Sức chứa	2 gm	5 gm	6.1 gm	11 gm
Độ đọc	1 μg	1 μg	1 μg	1 μg
Độ lặp lại	1 μg	1 μg	1 μg	1 μg
Độ chính xác (+/-)	3 μg	5 μg	5 μg	6 μg
Trọng lượng min USP	2 mg	2 mg	2 mg	6 mg
Kích thước đĩa (mm)	50-100Ø			
Thời gian đáp ứng	8 - 10 sec.			
Hiệu chuẩn	Chuẩn nội tự động thời gian & nhiệt độ. Kiểm soát hiệu chuẩn thông minh			
Màn hình	Màn hình LCD chữ và số			
Độ nhạy điểm trôi	$\pm 1\text{ppm}$ ($1 \times 10^6 / ^\circ\text{C}$)			
Kết nối	RS 232 or USB			
Chế độ trừ bì	Toàn dải			
Nhiệt độ hoạt động.	18°C ~ 30°C			
Năng lượng	A/C Adaptor 230V or 115V +/- 20% 50-60Hz			
Bảo mật	Người quản lý và mật khẩu			
Tuân thủ	Tuân thủ ISO / GLP / GMP			
Các chế độ	PCS, % Weighing, Animal/Dynamic Weighing, Check Weighing, Automatic Density Determination Formulation etc.			
Buồng cân	Ø75 x 86.5			
Trọng lượng	10.20 kgs / 14.70 kgs			
Kích thước cân	Phần cơ khí: 360 x 140 x 146 / Điện tử: 240 x 210 x 65			

Máy in dữ liệu

CPR 02



Mẫu in

22-Mar-12	11:13AM
Model	Aczet
Ser. no.	CY 224
Ver. no.	9021151
ID	r0.1.04
1234567	
Calibration:	External
W-ID	
Temperature	29.378°C
Set	+ 200.0000g
Diff.	-0.0031g
Internal Cal Done	
Diff.	0.0000g
22-Mar-12	11:13AM
Name :	

Mật khẩu bảo vệ ngày và giờ

Máy in dữ liệu thống kê của Aczet lý tưởng cho ứng dụng trong phòng thí nghiệm thông thường với các tính năng sau.

Tài liệu kết quả phù hợp GLP / GMP

Nó cung cấp hồ sơ dễ đọc trên giấy in có thể tồn tại trong nhiều năm.

Trích xuất đầy đủ về tất cả dữ liệu bao gồm hiệu chuẩn, kết quả cân, dữ liệu chính xác và thông tin thời gian ngay cả khi mất điện, (với tính năng Bảo vệ Mật khẩu Ngày và Giờ).

Bàn cân chống rung (Avt)

VRD - AVT



- **Mặt chống rung:** Khu vực chống rung 100% sẽ được làm từ đá granit màu đen được đánh bóng ép trên tấm kadappa. Giữa 1 inch đệm chống rung
- **MOC:** Khung mạ G.I.50x 100 epoxy.
- **Giá treo chống rung:** Chống rung 2 giai đoạn cho hiệu quả giảm chấn kép. Được gắn trên các giảm xóc chống rung nặng đặc biệt. Chân giá có 4 đệm cao su chống rung
- Điều chỉnh độ cao chân
- Đệm cao su có độ cứng đặc biệt 'D' sử dụng cho các thanh chống rung.
- Tất cả các AVT / VIT đều được kiểm tra bằng máy đo độ rung hiệu chuẩn.
- Chiều cao bàn làm việc có thể ngồi 750 mm hoặc đứng 900 mm

Tùy chọn

- Tiêu chuẩn
- Gắn lò xo chống sốc nâng cao. (MỚI)
- Gắn kết khí nén tự động nâng cao. (MỚI)

Bộ ion hoá chống tĩnh điện

CI-01 & CI-02



Thiết bị ion chống tĩnh điện được sử dụng để loại bỏ chủ yếu các ion cộng, loại bỏ các ion khỏi bộ tải, các yếu tố cân bằng và môi trường. Các điện tích của không khí được trung hòa tạo ra sự cân bằng gần đúng của các ion cộng và trừ.

Mất cân bằng các ion âm và dương trong không khí có thể gây ra các ảnh hưởng điện không mong muốn (lực hút hoặc lực đẩy) của các phần tử ở khoảng cách nhỏ với nhau. Nó thường được dùng cho các vật liệu không dẫn điện (nhựa, thủy tinh). Vì một số yếu tố thiết bị được làm bằng nhựa và thủy tinh. Vấn đề này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động, ảnh hưởng xuất hiện dưới dạng lỗi lặp lại nhiều lần hoặc là lỗi chỉ dẫn

ACZET PVT. LTD.

Unit No. E-2, Plot No. 11,
WICEL, Opp. Seepz Gate No. 1,
Andheri (East), Mumbai - 400 093. (INDIA)
Tel. : +91 - 22 - 4243 7700 | Fax : +91 - 22 - 4243 7800
E-mail : sales@citizenscales.com

BRANCH Delhi • Kolkata • Jaipur • Hyderabad • Bangalore • Chennai • Gujrat • Punjab • Parwanoo (HP) • Pune • Nagpur

Distributor

